



1. Ingresar a <https://portal.zeiss.com/>
2. Registrarse con un nuevo usuario. El usuario debe ser creado con su propio correo y datos.

Su Portal ZEISS

le ofrece diversos servicios que simplifican su trabajo diario con sus sistemas ZEISS (máquinas y software). Está sometido a un proceso de mejora y desarrollo continuo para adaptarse mejor a sus necesidades y requerimientos. Regístrese ahora para formar parte de la comunidad digital de ZEISS.

[Inicia sesion](#) [Regístrese ahora](#)

Servicio técnico

En caso de problemas puede enviar solicitudes directamente a nuestros servicio 24/7. El estado actual puede verse en cualquier momento.

Lanzamientos de software

Manténgase informado de las próximas fechas de lanzamientos de software ZEISS.

Próximamente más

Trabajamos continuamente en la mejora del Portal ZEISS para brindarle el mejor servicio posible.

Colocar datos personales correspondientes y continuar con el proceso de registro.

IMPORTANTE: Al momento de colocar “Experiencia Profesional” es necesario colocar “Microscopía e investigación”.



Su experiencia profesional

23 %

¿Cuál de las siguientes describe su trabajo?

☒ Medicina

☐ Microscopía e investigación

☒ Metrología

☒ Visión, Lentes, Gafas

Anterior

Siguiente

Rellene con sus datos personales y cree su contraseña. Guárdela porque volverá a usarla más adelante.

Cree su cuenta

30 %

Información Personal

Nombre

Apellidos

Email

edehner@bio-ingenieria.com

Contraseña



[Genere su contraseña](#)

Anterior

Siguiente



Luego, complete los datos del lugar donde trabaja. Es importante aceptar los términos y condiciones al finalizar.

Su organización

53 %

¿Dónde estás trabajando?

Nombre de la organización

Dirección

Código Postal

Ciudad

Ubicación

Argentina

- ☐ Acepto los [Términos y Condiciones](#) de ZEISS ID. ←
- ☐ Acepto los [Términos y condiciones](#) del Portal ZEISS. ←
- ☐ Doy mi consentimiento para recibir información y novedades de empresas del grupo ZEISS por correo electrónico. Tengo derecho a revocar este consentimiento en cualquier momento haciendo click [aquí](#).

If you want to have more information on data processing at ZEISS please refer to our [data privacy notice](#).

[Anterior](#)

[Completado](#)

Al finalizar, recibirá un correo al mail que registro para poder verificar la dirección. Debe ir a su correo y seguir las instrucciones.



¡Gracias por registrarte!

¿Qué pasa después?



Después del proceso de aprobación, recibirá un correo electrónico a ~~dehner@bioingenieria.com~~ para verificar su identidad y para iniciar sesión por primera vez.



Asignaremos la organización correcta a su cuenta y verificaremos su afiliación para que pueda disfrutar de la funcionalidad completa del Portal ZEISS.



El proceso de aprobación generalmente concluye en minutos. El proceso de verificación de la organización puede tardar unos días.



3. Loggearse en portal.zeiss.com e ir a "Download Center".

ZEISS

Estimado/a Sr. Dehner,

Bienvenido/a a su Portal ZEISS.

ZEISS Trial License

Get hands-on with our latest software trials

ZEISS has a suite of cutting-edge software applications and modules whatever your research focus. With a trial at no cost, ensure you get the very best out of your microscope straight away

[→ Start Your Trial](#)



4. Seleccionar el instalador de software “Microscopy Installer”. Importante seleccionar esta versión, y no las versiones “sueltas” de ZEN que se encuentran a un costado.

Download Center

Software Hardware Documentation

Field of Work: Microscopy Search for software name, version or file type...

Search examples: "ZEN core 3.0 full version", "LSM 700", "Axiovision hotfix"...

ZEISS Microscopy Software [Manage Notifications](#)

**ZEISS Microscopy Installer**
Latest version: 1.14
Tool for installation and maintenance of ZEISS microscopy software products.
[Show all files](#)

**ZEN**
Latest version: 3.12
Digital imaging suite for light and confocal microscopy.
[Show all files](#)

**ZEN lite**
Latest version: 3.12 lite
Free of charge version of ZEN microscopy software.
[Show all files](#)

5. Descargar el instalador.

ZEISS Microscopy Installer

[← Back to overview](#) Interested in upcoming releases? [Notify Me](#)

**ZEISS Microscopy Installer (latest version)**
Released: 27/03/2025
Size: 115.6 MB

[Download](#)


Release Highlights

ZEISS Microscopy Installer allows you to install, uninstall, and update ZEISS Microscopy software products directly from the cloud.


For more information, read the [Release Notes](#) and the [Software Manual](#).

The Installer supports the following products (including components, such as MTB2011, Python, Word Add-In):

6. Ejecutar el archivo descargado.
7. Aceptar el “Update” en caso de ser necesario.

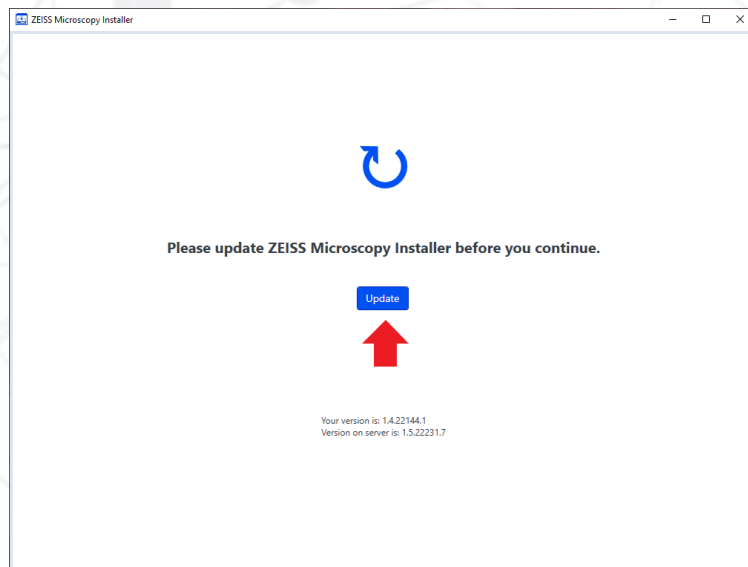

8. Descargar la versión de ZEN que corresponda. **ZEN** y **ZEN Lite**, para muestras biológicas. **ZEN Core**, para muestras de industria y materiales. **Labscope** para rutinas y educación. Loggearse con la cuenta que crearon al principio.

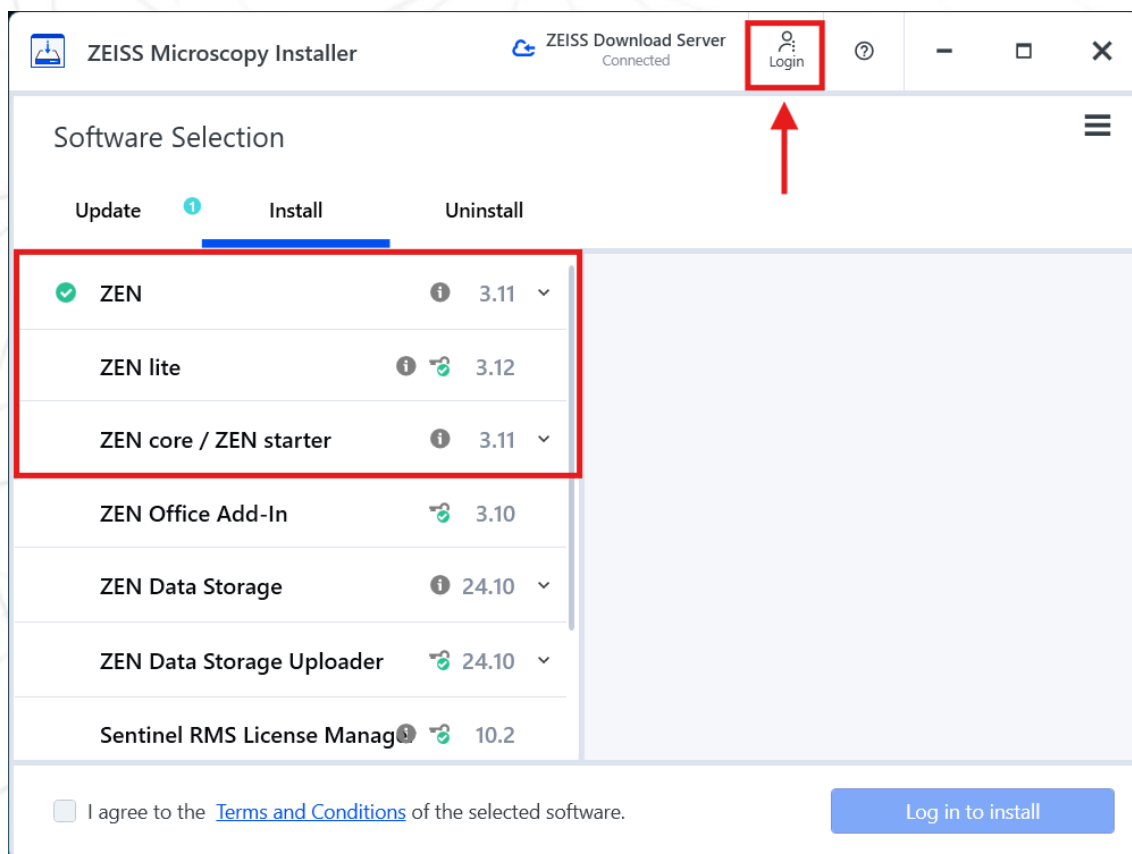



9. Una vez seleccionada la versión, en caso de contar con una licencia paga debe ser introducida en este paso. En caso de **NO CONTAR** con una licencia y utilizar la version gratuita del software, solo debe ignorar ese paso.

License status ✖ No license available

Activate licenseObtain new license

10. Aceptar los términos y condiciones.

En caso de que se necesite “Loggear para instalar” serán necesarios el usuario y contraseña creados por usted en el paso 2.

ZEISS Microscopy Installer

ZEISS Download Server
Connected

Luciano Dehner

?

—

□

✕

Software Selection

Update 1

Install

Uninstall

✓ ZEN 3.11

ZEN lite 3.12

ZEN core / ZEN starter 3.11

ZEN Office Add-In 3.10

ZEN Data Storage 24.10

ZEN Data Storage Uploader 24.10

Sentinel RMS License Manag 10.2

License status

Free license

ZEN application components

✓ ZEN 3.12.0

✓ ZEN Third Party Libraries 3.12.0

☐ ZEN Language Pack 3.12.0

✓ ZEN Manuals 3.12.0

✓ ZEN Online Help 3.12.0

ZEISS hardware drivers

✓ ZEISS Micro Toolbox (MTB) 3.11.9.2512606

✓ Avicam Drivers 1.0.24162.1

Required disk space: 11.8 GB

☒ I agree to the [Terms and Conditions](#) of the selected software.

Install

11. Instalar, el instalador se encargará de realizar todas las descargas e instalaciones correspondientes.